

La aplicación de la subida DAFO Toe Pad (opcional con correa secuestro del pie)

He aquí cómo precisamente la posición de la plataforma de pie en su lugar DAFO para el mejor confort y apoyo. La almohadilla del dedo del pie puede incluir una correa de secuestro dedo del pie.


1




Con el pie puñetazo del paciente en el DAFO y correas garantizado, levante los dedos del pie ligeramente y deslice la almohadilla de aumento de pie en su lugar sin retirar el papel protector.

2

La posición de la almohadilla de aumento de pie de manera que una pequeña brecha que existe entre las cabezas de los metatarsianos y la almohadilla. *Una diferencia demasiado grande o ninguno en absoluto causa molestia. Cuando el posicionamiento, considerar la carga de peso tamaño y el crecimiento esperado de la fiebre.*

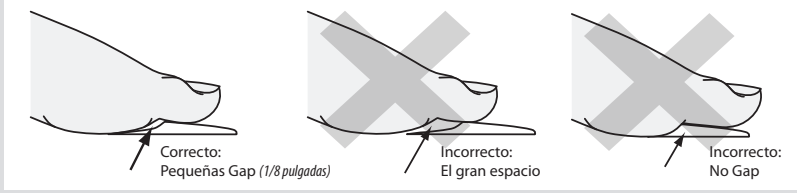


3

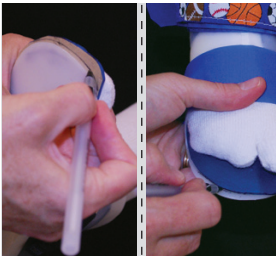

Marcado para Rise Toe colocación de notas

- **Si la plataforma de elevación dedo del pie es más largo que el DAFO:** Trace el borde frontal del corsé a lo largo de la parte inferior de la almohadilla para hacer una línea de referencia de recorte.
- **Si el DAFO es más largo que el aumento de los pies pad:** Dibuje una línea en el plástico con el extremo distal de la pad como su guía.


4

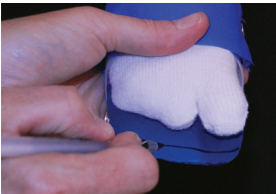

Marca para el recorte final de línea

Marque la parte superior de la almohadilla de aumento de los pies a lo largo de la plataforma de los dedos para recortar final. *Ancho de un pulgar a menudo es una buena medida del crecimiento previsto para los niños.*

5

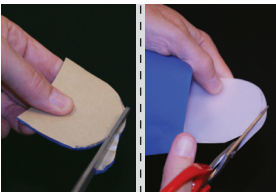

Recorte para Rise Toe colocación de notas


Retire la almohadilla de aumento de dedo del pie y el pie de la abrazadera y ajuste a la línea marcada (ya sea en el plástico o el pad).

6



Retire el papel protector de la almohadilla de aumento de los dedos y colocar la almohadilla con el corsé.

7

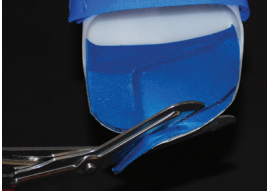


Recorte de recorte final de línea

Trim a la línea de corte final a lo largo de la plataforma del pie.



Si la almohadilla de cuero incluye una correa de secuestro dedo del pie, por favor, siga los pasos 8 a 10.

8

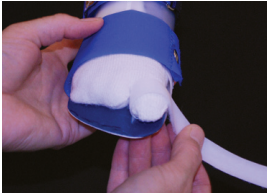

En el pie de la espalda del paciente en la abrazadera y correas asegurado, prueba de la colocación de la correa dedo por encontrar la mejor posición de los pies corregida de su paciente.

9



Conecte la ficha se enganchan a la parte inferior de la abrazadera de forma que se alinea con la colocación de la correa del pie.

10



Tire de la correa de dedo del pie en el dedo y lo ata a en la ficha gancho. Recorte de la correa en un ángulo a longitud deseada.

Para obtener más información o preguntas,
Servicio al Cliente:

800-848-7332
customerservice@dafo.com

CASCADE[®]
The **daFO** People[®]

Cascade Dafo, Inc.

1360 Sunset Ave
Ferndale, WA 98248

ph: 800.848.7332
fax: 877.856.2160

intl: + 00 1 360 543 9306
www.cascadedrafo.com